

totale
eclipse




FRAME
ACIME
12000, Boulevard de l'Industrie

é totale éclipse

PARAVENT TÉLESCOPIQUE - RÉFÉRENCES : ECLIPSE160 OU ECLIPSE210

- Se pivote sur le coté
- Crosses, bagues de coulissement, butées d'arrêt, anneaux en matière plastique injectée
- Les anneaux sont munis d'un système d'escamotage afin d'éviter d'endommager les tubes
- Les tubes sont en aluminium anodisé couleur gris argent
- 4 coloris différents pour les parties en plastique

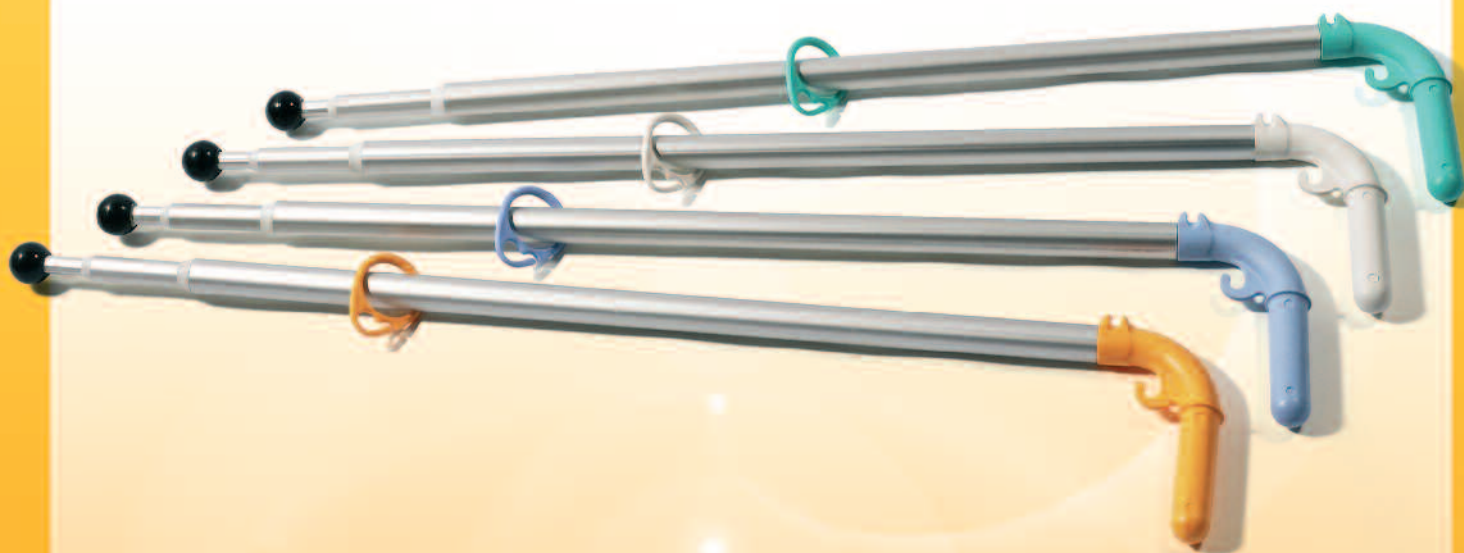

ECLIPSEANO



PORTECLIPSE-F



PORTECLIPSE-R



é totale éclipse

PARAVENT TÉLESCOPIQUE PLIABLE - RÉFÉRENCES : ECLIPSE160RA OU ECLIPSE210RA

Le télescope pliable permet de réaliser un gain de place très important lors du rangement

- L'ensemble pivote sur lui-même sans aucune difficulté
- Crosses, bagues de coulissement, butées d'arrêt, anneaux en matière plastique injectée
- Les anneaux sont munis d'un système d'escamotage afin d'éviter d'endommager les tubes
- Les tubes sont en aluminium anodisé couleur gris argent



le système de pliage des versions ECLIPSE160RA ou ECLIPSE210RA est un système breveté ACIME FRAME

Il permet la mise en place du télescope, ou au contraire le pliage d'une seule main sans aucun verrouillage et par simple "clic". Lorsque le télescope est replié, le maintien en place du tube télescopique est possible grâce à un système de verrouillage propre aux fabrications

PORTECLIPSE-F



PORTECLIPSE-R



é totale éclipse

TÉLESCOPES

- 5 COLORIS DIFFERENTS : BLANC - PARME - VERT D'EAU - ORANGE

Réf. :	Descriptif / Dimensions (en mm)
ECLIPSE160	Dimension rentrée : 750mm - Dimensions sorties : 1600mm Télescopique horizontalement - Sans support
ECLIPSE210	Dimension rentrée : 865mm - Dimensions sorties:2030mm Télescopique horizontalement - Sans support
ECLIPSE160RA	Télescope rabattable pour un rangement plus facile Dimension rentrée : 750mm - Dimensions sorties : 1600mm Dimension plié : 363 mm - Sans support
ECLIPSE210RA	Télescope rabattable pour un rangement plus facile Dimension rentrée : 865mm - Dimensions sorties : 2138mm Dimension plié : 363 mm - Sans support
PORTECLIPSE-F	Support acier époxyé fixé par 4 vis
PORTECLIPSE-R	Support en acier époxyé , fixé par 4 vis permettant un réglage facile et permanent de la gite
ECLIPSEANO	Lot de 16 anneaux incassables



RIDEAUX EN VINYLE 20/100 NON FEU M1 AVEC OÛILLETES PVC SOUDÉS

- 5 coloris différents , livrés avec les anneaux : GOLD - IRON - ZINC - COPPER RED - ALUMINE

Réf. :	DIMENSIONS en cms - Longueur par Hauteur
ECLIPSE170140S	170 x 140
ECLIPSE230140S	230 x 140
ECLIPSE230175S	230 x 175

é totale éclipse

ANNEAUX DU PARAVENT TÉLESCOPIQUE PLIABLE - RÉFÉRENCES : ECLIPSEANO

- Les anneaux des paravents "Totale Éclipse" sont garantis incassables
- La partie accrochée au rideau se déforme lorsque l'effort est trop important, permettant ainsi le "décrochage" du rideau, évitant par conséquent d'endommager le télescope, lorsque par inadvertance une personne tirait trop violemment sur le rideau



RIDEAUX EN TRÉVIRA CS BIO ACTIVE NON FEU M1 AVEC ACTION ANTI-BACTERIENNE

- Il protège de la prolifération des bactéries
- une assurance contre le développement des odeurs
- Très grande résistance au lavage à 60°C, nettoyage à sec, séchage en machine à 90° C
- 5 coloris différents, livrés avec les anneaux : GENTIANE - BLANC - ABRICOT - BLE

Réf. :

DIMENSIONS en cms - Longueur par Hauteur

BIOTCS170140

170 x 140 - 13 CEILLETES NICKELÉES

BIOTCS230140

230 x 140 - 16 CEILLETES NICKELÉES

BIOTCS230175

230 x 175 - 16 CEILLETES NICKELÉES

é
totale éclipse

ECLIPSROLL

Protégez votre patient des regards indiscrets !!!



Portique roulant
Pour paravents télescopiques

é totale éclipse

PARAVENTS TÉLESCOPIQUES SUR PORTIQUE ROULANT, ECLIPSROLL



ROLFIX

Réf. :	DESIGNATIONS
ECLIPSROLL	portique roulant en acier époxyé de couleur gris métallisé 5 roulettes de diamètre 75mm à freins On peut y fixer un deuxième télescope en y ajoutant la pince ROLFIX
ROLFIX	Pince en aluminium munie d'une mollette de serrage permettant de rajouter 1 télescope

EQUIPEMENTS CONSEILLES

TÉLESCOPES

ECLIPSE160RA	Dimension rentrée : 750mm - Dimensions sorties : 1600mm Télescopique horizontalement
ECLIPSE210RA	Télescope rabattable pour un rangement plus facile Dimension rentrée : 865mm - Dimensions sorties : 2030mm Dimension plié : 360 mm

Rideaux

ECLIPSE170140S	170 x 140
ECLIPSE230140S	230 x 140
BIOTCS170140	170 x 140 - 13 CÈILLETES NICKÉLES - Trevira
BIOTCS230140	230 x 140 - 16 CÈILLETES NICKÉLES - Trevira

é totale éclipse

PARAVENTS A PANNEAUX - EN VINYL 20/100 M1

- 5 COLORIS DIFFERENTS : GOLD - IRON - ZINC - COPPER RED - ALUMINE
- MONTAGE SUR ROULETTES EN POLYAMIDE : Ø 50 MM
- CADRE EN ALUMINIUM ANODISE : tube de 20 x 20 mm
- CADRE EN "T" pour une meilleure stabilité



Réf. :	Dimensions (en cms) / Hauteur x Longueur déployé
PAN2	H 177 x L 101 - 6 roulettes
PAN3	H 177 x L 156 - 8 roulettes
PAN4	H 177 x L 204 - 12 roulettes



Siège Social & Usine / Head Office & Plant
10, rue du Bon Air - 62930 WIMEREUX - FRANCE
Tél. central : +33 (0)3 21 10 25 30 - Tél. export : +33 (0)3 21 10 90 43
Téléfax : +33 (0)3 21 87 39 45
Internet : www.acimeframe.com - E-mail : pblosseville@nordnet.fr

