

# CAREXIA FPUE

Fauteuil de soins à hauteur variable électrique  
SOLUTIONS D'ACCUEIL ET DE TRANSFERT



FAUTEUILS DE SOINS AMBULATOIRES AVEC ACCOUDOIRS



## DESCRIPTION



**Carexia FPVE**  
*Fauteuil de soins polyvalent  
à hauteur variable électrique*

**Carexia FPVE**  
*Fauteuil de soins polyvalent  
avec repose-jambes long et repose-pieds*

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CAREXIA est un fauteuil de soins polyvalent. Ses formes douces et accueillantes apportent confort, relaxation et sérénité au patient. Son design pur et harmonieux sera le vecteur d'une image valorisante pour votre service. CAREXIA est un fauteuil destiné au repos post-opératoire, aux prélèvements, aux soins ou examens, à la chimiothérapie ou à l'hémodialyse.

**Largeur hors tout :** 73,2 cm avec accoudoirs  
90 cm avec gouttières

**Largeur s'assise :** 57 cm.

**Longueur hors tout :** de 76,4cm en position assise à 170 cm en position allongée avec repose jambe long.

**Hauteur hors tout :** 130 cm.

**Poids :** de 65 à 85 kg en fonction du modèle.

**Garantie :** 2 ans.

Piètement en acier haute résistance mécano soudé.  
Revêtement anticorrosion époxy cuit au four.

Hauteur variable sur colonne électrique de 54 à 78 cm (hauteur sol / assise)

Commande par pédale bilatérale.

Assise et dossier en forme ergonomique. Revêtement PVC non feu M1.

Mousse Haute Résilience HR60 kg/m<sup>3</sup> sur support rigide.

Repose tête intégré

Dossier et relève jambes électriques indépendants et synchronisés

Inclinaison jusqu'à la déclive - 1 touche sur la télécommande.

Monté sur 4 roulettes double galets à freinage indépendant

Capot de chassis en ABS avec panier à effets

Accoudoirs polyuréthane forme ergonomique escamotables vers l'arrière

Charge de fonctionnement en sécurité : 200 kg



## OPTIONS DÉSIGNATION / CARACTÉRISTIQUES

Réf.	Description
FPORS1	4 roues à commande centralisée Ø 125
FPORS2	4 roues double galets à commande centralisée Ø 150
FPOBP	Barre de poussée
FPORJL	Relève jambes long
FPORP	Repose pieds pour RJ long (uniquement avec option FPORJL)
FPOCP1	Mise en position relax puis décline à commande au pied bilatérale.
FPOCP2	Hauteur variable à commande bilatérale supplémentaire au pieds (FPVE)
FPOSA	2 emplacements pour tige à sérum
TSR2	Tige porte sérum amovible et réglable
FPOAC4	Accoudoirs confort
FPOAC3	Accoudoirs forme gouttière orientables, relevables et réglables en hauteur
FPOAC2	Gouttière pour prélèvement (la paire)
FPOSR	Support rouleau papier à la tête
FPOLAMP	Lampe de lecture LED
SUPTAB	Support I-Pad
FPOGC	Garniture Ultra Confort Couche de 3 cm de mousse viscoélastique sur assise et dossier



Carexia FPVE en position décline.



Commande Pied hauteur variable (en option).


OPTIONS DÉSIGNATION / CARACTÉRISTIQUES



Réf FPORS2  
Roue double galets  
Ø 150 mm



Réf TSR2  
Tige porte sérum  
amovible

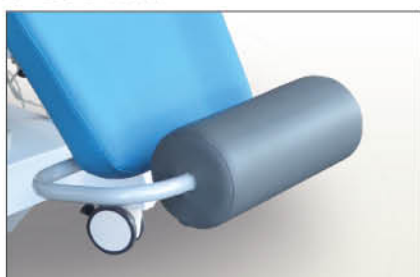

Réf FPORP  
Repose pieds pour relève  
jambes long



Réf SUPTAB  
Support I-Pad



Réf FPOAC3  
Accoudoirs forme gouttière  
orientables, relevables et



Réf FPOSR  
Support rouleau papier



Réf FPOLAMP  
Lampe de lecture LED



Réf FPOSA  
2 emplacements pour  
tige à sérum

