



LIT HYDRAULIQUE



**LIT HYD**





Lit  
Hydraulique

CONFORTABLE, HYGIÉNIQUE ET SÉCURISÉ

Le Lit Hydraulique est particulièrement adapté aux services de psychiatrie du fait de sa conception robuste mais s'adapte aussi à tout type d'établissement ne pouvant pas utiliser de lits électriques.

Les différentes fonctions sont assurées par des vérins hydrauliques et à gaz qui offrent un confort optimal au patient et facilitent la manipulation pour le soignant.

 **CONFORT ET BIEN-ÊTRE DES PATIENTS RENFORCÉS**

- Une sécurité renforcée avec des barrières 3/4 pour éviter les chutes et rassurer les familles.
- Une position fauteuil (proclive) confortable.
- Un plan de couchage en compact pour un confort optimal.

 **FACILITÉ DE TRAVAIL AU QUOTIDIEN POUR LE PERSONNEL SOIGNANT**

- Une accessibilité complète sous le lit pour accueillir une table à manger au lit ou un lève malade.
- Une grande maniabilité du lit grâce à des roues de différents diamètres.
- Un lit avec toutes les fonctions assistés par des vérins hydrauliques.

 **SÉCURITÉ HYGIÉNIQUE RENFORCÉE ET UNE DÉSINFECTION OPTIMALE**

- Une conception offrant une facilité pour la désinfection des différentes parties : surface de couchage, du châssis bas, roues, télécommandes et accessoires.
- Un choix de matériaux et une construction unique pour prévenir des infections nosocomiales grâce à des surfaces lisses, facilement accessibles et avec des contacts limités.
- Un lit de conception robuste idéal pour les services de psychiatrie.



MOBILIERS DE CHAMBRE

# LIT HYDRAULIQUE

Réf. HB50312 et 50315/HB51312 et 51315

## 1| PANNEAU

Entourage hêtre massif  
(autre configuration possible)

## 2| PARE CHOCS

## 3| MANŒUVRABILITÉ ET FREINAGE

Maniabilité des déplacements assurée par roulettes de  $\varnothing 125$  ou  $\varnothing 150$  mm simples (ou double galets en option)

## 4| RELÈVE BUSTE

Assisté par vérin hydraulique

## 5| RELÈVE CUISSES

Assisté par vérin hydraulique  
(50315 - 51315)

## 6| CHASSIS

## 14| FREINS

(Servo freins en option)

## 7| PLAN COMPACT

6 mm.  
Fixe ou amovible.

## 8| ARRÊTS MATELAS

## 9| BARRIÈRE LATÉRALE

Toujours plus de sécurité et d'autonomie pour les patients, de confort d'utilisation pour le personnel soignant, avec notre barrière 3/4

## 10| RELÈVE JAMBES

Mécanique par crémaillère



## 11| PROCLIVE DÉCLIVE

(51312 - 51315)

## 12| RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

Variable hydraulique par pédale en pied de lit

## 13| BOUTON ACTIVATION BARRIÈRE LATÉRALE



- Une hygiène renforcée et une désinfection facilitée.
- De très faibles coûts d'entretien ou de maintenance.

## LES BARRIÈRES


Prévenir les chutes et faciliter l'autonomie




### ❖ Barrière 3/4

Conforme à la norme CEI 60601-2-52 prophylaxie des chutes

- Elle permet au patient de sortir du lit en situation d'urgence.
- Possibilité de rajout d'un complément de barrière pour une sécurité optimale.
- Déblocage de la barrière facilité par un simple bouton.

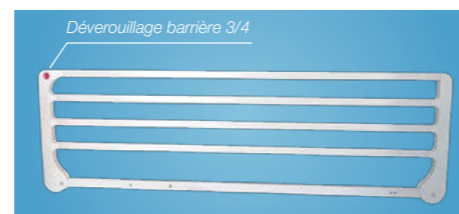

## LES DONNÉES TECHNIQUES

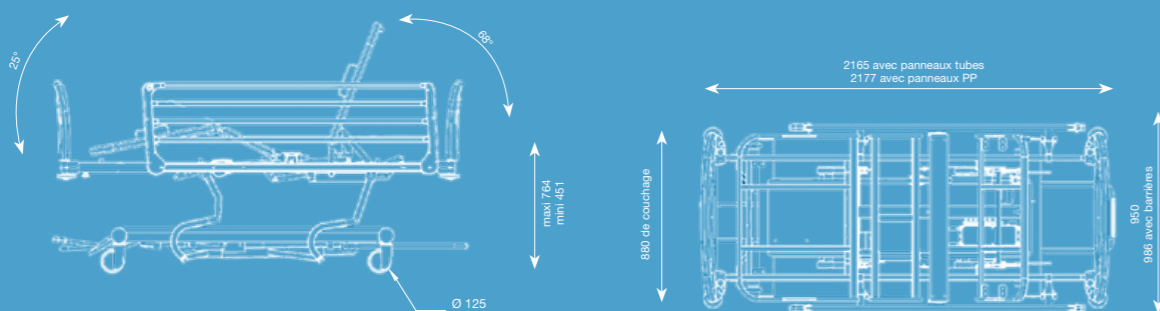

Lit à hauteur variable hydraulique  
réf. HB 50312 et 50315/HB 51312 et 51315

Hauteur minimum : 350 mm

Hauteur maximum : 710 mm

Réglage relève-buste maximum : 70°

HB51312/HB51315 Trendelenburg et Inverse : 13°

Section pieds : 30°

Remise à plat d'urgence : 4 secondes

Poids : 165 kg

Poids maxi de fonctionnement : 230 kg

Nos matériels sont des dispositifs médicaux de Classe I conformes à la directive 93/42/CEE.

Ils répondent aux normes :

- NF EN 60601-1
- NF EN 60601-2-52
- NF EN 60601-1-2

	Hauteur variable hydraulique	Proclive/déclive	Relève buste assisté hydraulique	Pliure des genoux assisté hydraulique	Relève jambe mécanique
50312	●		●		●
50315	●		●	●	●
51312	●	●	●		●
51315	●	●	●	●	●

## LES ACCESSOIRES



Paire de barrières pliantes 3/4  
réf. LSUGH2BPLAT2



Protection mousse pour barrières 3/4  
réf. LSUGHPMBF2



1 attache sangle boulonné  
réf. LSUGH1AS



Tiges porte serum 2 crochets  
réf. LSUGHPSTAL2NM



Tiges porte serum 4 crochets  
réf. LSUGHPSTAL4NM



Potence orientable  
réf. LSUGHPL



Poignée enrouleur sur potence  
réf. LSUGHPLPE



Porte sac à urine  
réf. LSUGHPSUCLA

## LES OPTIONS

Roulette double galet  
réf. LSUGHRDG125  
réf. LSUGHRDG150



4 roulettes  
ø100 / ø125 / ø150 servo  
réf. LSUGHRI125 / réf. LSUGHRI150  
• Freinage centralisé sur 4 roulettes dont 1 directionnelle



## LES PANNEAUX

Panneau plein  
réf. LSUGHPLUN



Panneau arrondi



Panneau cadre acier intérieur stratifié



Panneau Sagneronde



Panneau PP



Nuancier

