


Le modèle ComfortLine se distingue par sa conception, ses fonctionnalités, son confort, sa sécurité et son ergonomie d'utilisation.

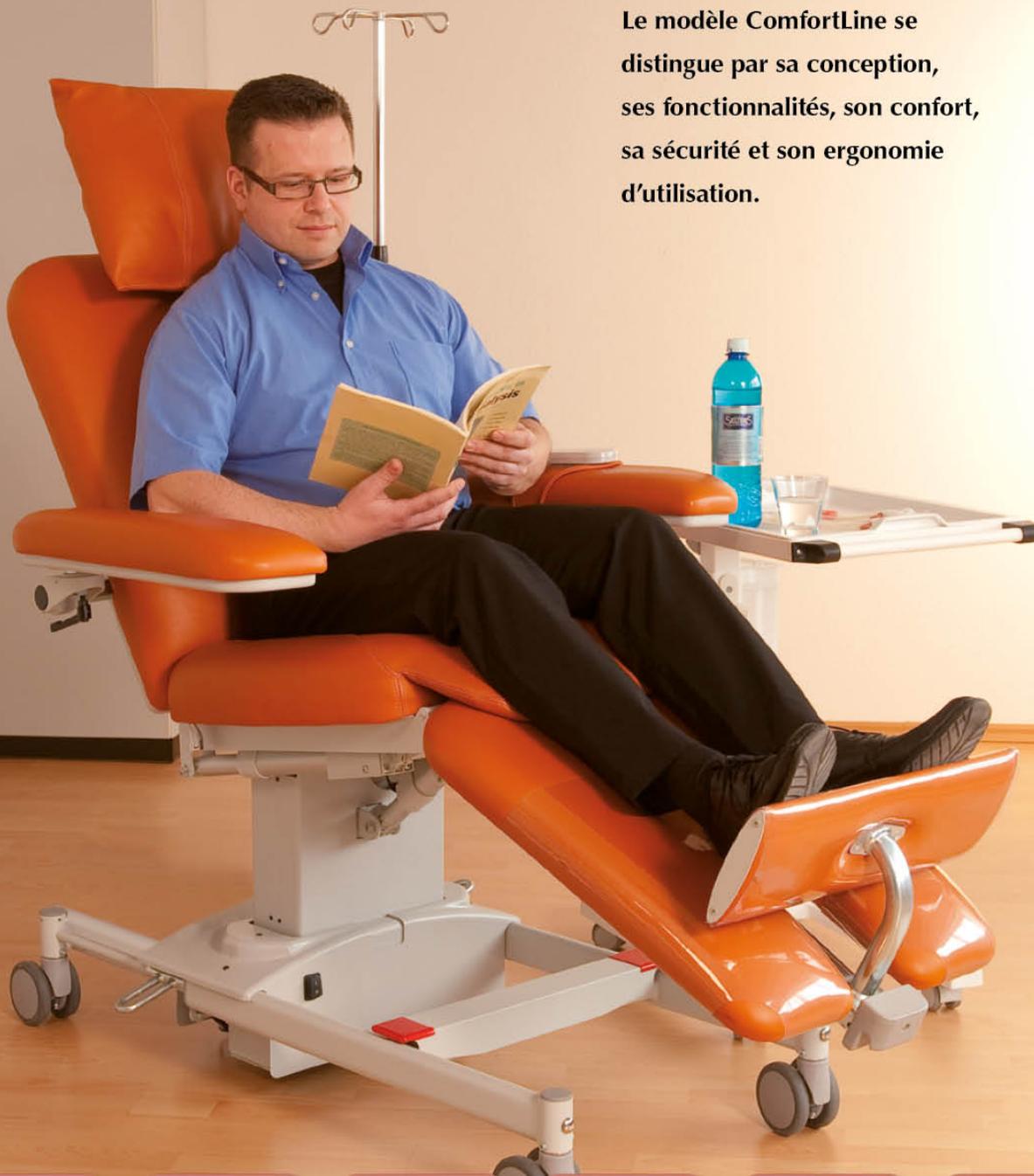

POINTS FORTS

Le ComfortLine est un modèle haut de gamme équipé de cinq moteurs permettant les réglages de la hauteur, du dossier, de la partie jambes, de l'inclinaison de l'assise et du repose-pieds. Il est équipé de roulettes avec un freinage centralisé qui est assuré par deux pédales implantées de chaque côté du fauteuil.

Un design moderne, une finition soignée de la sellerie ainsi que l'utilisation de pièces mécaniques et électriques de grande qualité confèrent au ComfortLine toutes les qualités d'un matériel haut de gamme.

La conception du châssis bas permet une charge maximale de 240 kg et offre une grande stabilité en position horizontale.

La position d'urgence en déclive par pédales bilatérales est rapide et très ergonomique car elle laisse les mains libres au personnel soignant.



Une télécommande au visuel intuitif permet les réglages individuels des mouvements.



Les accoudoirs sur rotule sont réglables et permettent le positionnement confortable des bras.



Les accoudoirs amovibles peuvent pivoter facilement pour faciliter l'accès.



Le repose-pieds réglable électriquement et amovible permet une amplitude de longueur de 43 cm.



Le réglage en hauteur du coussin de repose-tête offre un grand confort pour vos patients.



Le freinage centralisé est assuré par deux pédales implantées de chaque côté du fauteuil.



Les cinq moteurs sont localisés sous l'assise, ce qui facilite leur accès.



Equipotentialité assurée par le châssis selon EN 60601.



Position de déclive par pédales bilatérales ce qui laisse les mains libres au personnel soignant.



Assise abaissée sur demande pour faciliter l'accès aux patients en fauteuil roulant.

Le ComfortLine est disponible dans de nombreuses couleurs avec des combinaisons de selleries bicouleurs ou unicolores pour s'intégrer au mieux dans vos locaux.



OPTIONS COMMUNES À TOUS NOS MODÈLES

La gamme d'équipements optionnelles offre un confort supplémentaire et des fonctionnalités améliorées. Le protection plastique pour le relève-jambes et le repose-pieds ainsi qu'un dérouleur papier aident l'équipe médicale à répondre aux exigences d'hygiène. D'autres options proposées tige à sérum, la tablette pivotante, et une poignée pour déplacer le fauteuil facilement.

Pour plus de confort à vos patients, nous vous proposons deux types d'assise ultra-confortable: la mousse visco-élastique ou la mousse à plots.

La lampe LED offre une lumière agréable pour la lecture en cours de soins.



Protection plastique

Pour le relève-jambes et le repose-pieds pour une protection de la sellerie et une meilleure hygiène.



Tige à sérum

Elle peut être installée de chaque côté du fauteuil sur le châssis bas pour un gain de place.



Tablette pivotante

Pour l'installation de matériel elle peut être aussi installée de chaque côté du fauteuil.



Poignée

Fixée à l'arrière du dossier, elle permet de déplacer facilement le fauteuil. Cette poignée est nécessaire pour l'installation du dérouleur de papier ou de la lampe.



Lampe LED

Pour lire ou travailler cet accessoire est fixé sur la poignée.



Dérouleur papier

Support pour rouleau de drap d'examen largeur 50 cm fixé sur la poignée.



Assise ultra-confortable

Composée de mousse visco-élastique à mémoire de forme, elle assure un confort optimal du patient.



PU accoudoir

L'accoudoir en mousse polyuréthane satisfait aux normes élevées de confort et est également très stable et résistant.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET COULEURS DISPONIBLES

Caractéristiques techniques	ComfortLine	ComfortLine à assise abaissée	UniversalLine	BasicLine
Dimensions				
Largeur d'assise	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Largeur avec accoudoirs	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm
Longueur totale	220 cm	220 cm	215 cm	215 cm
Poids total	92 kg	92 kg	85 kg	80 kg
Garde au sol	11 cm	3 cm	11 cm	11 cm
Réglages				
Dossier (angle)	75° – 0°	80° – 0°	75° – 20°	75° - 20°
Inclinaison assise (angle)	30° – 5°	25° – 0°	30° – 5°	30° - 5°
Repose-jambes (angle)	5° – 30°	0° – 25°	5° – 30°	5° - 30°
Repose pieds (amplitude)	25 cm électrique + 18 cm mécanique	12 cm électrique + 18 cm mécanique	30 cm mécanique	30 cm mécanique
Réglage de la hauteur	60 – 80 cm	50 – 63 cm	60 – 80 cm	60 cm (fixe)
Caractéristiques électriques				
Alimentation / voltage V / Hz	230 V 50/60 Hz	230 V 50/60 Hz	230 V 50/60 Hz	230 V 50/60 Hz
Cosommation V	173 VA	173 VA	173 VA	173 VA
Classe de protection	2	2	2	2
Indice de protection	IPX 4	IPX 4	IPX 4	IPX 4
Conforme selon	EN 60601	EN 60601	EN 60601	EN 60601
Moteurs	5	5	4	2
Sécurité				
Charge maximale admissible	240 kg	240 kg	180 kg	180 kg
Position décline (angle)	- 12°	- 12°	- 12°	- 12°
Temps d'activation décline	10 sec	10 sec	10 sec	15 sec

Gris Chrome couleur standard

Feuer

Atoll

Amazonas

Coloris disponibles: La couleur standard des fauteuils des soins est gris chrome uni. Les couleurs supplémentaires sont Atoll, Amazonas, Feuer ou Lima en unicolore ou bicouleur (avec le gris chrome). Nous disposons sur demande d'un nuancier de 35 couleurs .

