

Fauteuil de soins DreamLine avec matelas monobloc pour plus de souplesse et de confort



FAUTEUILS DE SOINS AMBULATOIRES AVEC ACCOUDOIRS

POINTS FORTS

Accessoires pour vos besoins particuliers



Les accoudoirs robuste et amovibles sur rotules peuvent être réglés dans toutes les positions et assurent un parfait positionnement du bras.



Pour la sécurité de vos patients, quatre barrières peuvent être facilement installées sur le fauteuil DreamLine.



Une potence pour permettre à vos patients de se redresser et leur garantir une meilleure autonomie.



Une tige à sérum peut être directement installée à l'arrière du dossier du fauteuil DreamLine.



Une lampe à LED offre une lumière plaisante pour la lecture ou le travail de vos patients durant leur traitement.

Couleur standard
Chrom gris

Amazonas

Feuer

Atoll

Le panneau de tête et de repose-pieds peuvent être aux couleurs ci-dessus. Autres couleurs disponibles. Le matelas est blanc. Contactez-nous!

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions

Largeur sans accoudoirs	90 cm
Longueur totale	230 cm
Largeur matelas	75 cm
Longueur matelas	215 cm
Poids total	123 kg

Caractéristiques électriques

Classe de protection	2
Indice de protection	IPX 4
Conforme selon	EN 60601
Moteurs	5

Réglages

Dossier (angle)	0° – 75°
Inclinaison assise (angle)	0° – 25°
Repose-james (angle)	0° – 25°
Repose pieds (amplitude)	23 cm
Réglage de la hauteur (avec matelas)	55 – 95 cm

Sécurité

Charge maximale admissible	250 kg
Position décline (angle)	- 12°
Temps d'activation décline	15 sec



Le DreamLine – offre une multitude de possibilités, de la pos



Une assise ultra-basse permet un accès facilité ainsi que le transfert à partir d'un fauteuil roulant.



Le patient peut durant son traitement agir sur les mouvements pour trouver la position la plus agréable et relaxante.

Le DreamLine possède un certain nombre d'avantages par rapport à un fauteuil de soins classique, notamment la sellerie monobloc très confortable, la possibilité d'accéder à une position assise ou totalement allongée comme un lit, ainsi que de nombreuses fonctionnalités.

Cinq moteurs silencieux commandés par une télécommande simple d'utilisation permettent d'assurer une transition harmonieuse des mouvements. Une amplitude de réglage de la hauteur de 55 à 95 cm permet une bonne accessibilité par le patient ainsi qu'une bonne mise à hauteur pour le personnel soignant. Le repose-pieds est réglable électriquement afin d'accueillir des patients de toutes tailles .

Grâce à la conception de son châssis inférieur, le DreamLine est très stable dans toutes les positions. L'équipotentialité selon la directive EN 60601 est un gage de sécurité supplémentaire pour votre patient.


Le matelas s'enlève facilement, et le sommier

est composé de plaques en PP résistantes aux décontaminants qui sont simples à nettoyer. L'ensemble sommier et matelas constituent pour le fauteuil DreamLine un atout majeur pour le confort du patient en position assise ou allongée.

En cas d'urgence la position de déclive peut être activée rapidement et facilement par le biais de deux pédales de chaque côté du fauteuil. De plus le panneau de tête peut être rapidement enlevé pour un meilleur accès au patient.

Des accessoires complémentaires peuvent être ajoutés comme des repose-bras, une tige à sérum et une potence pour augmenter la flexibilité du DreamLine et optimiser l'espace disponible. Si durant son traitement votre patient veut lire ou travailler, nous proposons une lampe LED qui produit une ambiance intime et plaisante. Et pour plus de sécurité nous proposons quatre demi-barrières à la mise en place simplifiée.

Position assise jusqu'à une position allongée très relaxante

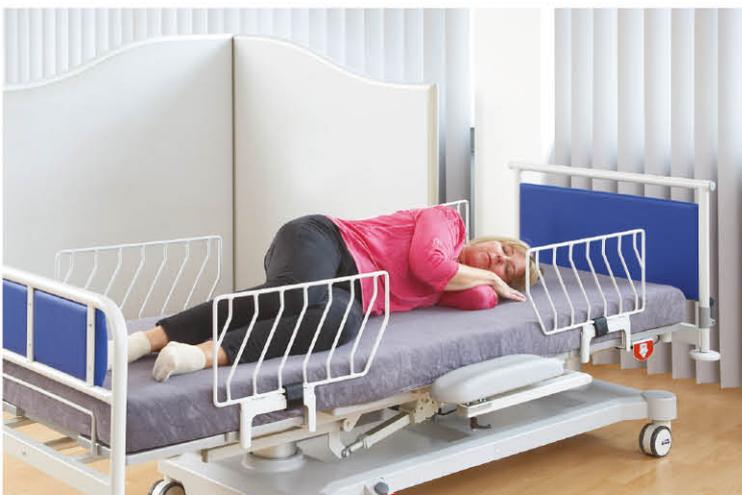

Pour une relaxation complète, le DreamLine peut s'allonger complètement.



La position de déclive par pédales bilatérales est rapide et ergonomique car elle laisse les mains libres au personnel.



Les trois positions les plus importantes sont pré-programmées sur la télécommande. Des touches supplémentaires permettent le réglage individuel des positions.



Grâce au panneau de repose-pieds électrique le DreamLine peut s'adapter facilement aux différentes tailles des patients. En option est proposé le repose-pieds amovible.



Le plan de couchage constitué de plaques en plastique est un support stable qui est facile à nettoyer et à décontaminer.



Deux pédales pour activer la déclive d'urgence et deux pédales pour le freinage centralisé présentent un code couleur et se trouvent à la base du fauteuil.



Le panneau de tête peut être enlevé facilement et rapidement en cas d'urgence pour un accès total à la tête du patient.



De plus en cas d'urgence le dossier peut être abaissé manuellement avec la poignée CPR pour une réanimation cardio-pulmonaire.

