

Peu encombrant, flexible et confortable - SlimLine pour les soins en hôpital de jour



FAUTEUILS DE SOINS AMBULATOIRES AVEC ACCOUDOIRS

POINTS FORTS

Accessoires pour répondre à vos besoins spécifiques



Pour plus d'hygiène un porte-rouleau drap d'examen peut-être installé à l'arrière du dossier de relève-buste.



La lampe de lecture à LEDS pratique offre une source de lumière discrète pour le besoin de vos patients.



Dans un souci de gain d'espace, la tige à sérum peut être montée à la droite ou à la gauche du châssis bas.



En cas de besoin, le Bionic SlimLine peut être équipé d'une liaison équipotentielle.



Si nécessaire, les pieds stables permettent une hauteur d'entrée encore plus faible de seulement 54 cm.



Le support de sac pratique peut être monté sur l'accoudoir rapidement et facilement.



Plus de flexibilité et de confort pour vos patients propose l'encombrant et facile à régler table.

Safran
(Standard)

Limonade

Crème

Pistazio

Dolphins

Cyclame

Kirsche

Perle

Couleurs disponibles : Accoudoirs, châssis et coussin de tête (en option) toujours en Anthracite. La couleur de sellerie standard est Safran. Beaucoup d'autres couleurs sont disponibles. N'hésitez pas à nous demander notre nuancier.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions

Largeur d'assise	54 cm
Largeur avec accoudoirs	80 cm
Hauteur (fixé, avec roues, standard)	57,5 cm
Hauteur (fixé, avec pieds, en option)	54 cm
Longueur total	185 cm
Poids total	51 kg

Sécurité

Poids maximum autorisé	175 kg
Position tête en bas angle	- 10°

Réglages

Dossier (angle)	37° - 90°
Inclinaison assise (angle)	- 4° - 20°
Repose-jambes (angle)	0° - 90°

Caractéristiques électriques

Classe de protection	2
Indice de protection	IPX 6
Indice de protection (moteurs)	IPX 4
En conformité avec	EN 60601
Moteurs	2



SlimLine – encombrement minimal - un maximum



L'entrée et la sortie par l'avant du fauteuil sont facilitées par une hauteur d'assise de seulement 57,5 cm ainsi que par la position à angle droit du relève jambes et à l'inclinaison du siège.



Le fauteuil de soins SlimLine a été spécialement conçu pour la perfusion, de ce fait deux moteurs permettent d'atteindre une position de confort optimale.

Le fauteuil de soins SlimLine a été développé pour les besoins des hôpitaux d'oncologie ainsi que pour les services de médecine. Conçu pour être utilisé dans de petites salles, le fauteuil de soins étroit et léger offre avec ses deux moteurs la flexibilité nécessaire et le plus grand confort pour garantir à vos patients un traitement confortable.

A l'aide d'une télécommande conviviale, vous pouvez régler la position du dossier, de l'assise et du relève-jambes dans la position souhaitée. Le repose-jambe se déplace de façon synchrone avec l'assise, le relève-buste peut être réglé séparément. En appuyant sur un bouton le SlimLine est programmé dans une position de confort décontracté ou en cas d'urgence dans une position de déclive. Grâce aux deux supports, la télécommande est toujours accessible facilement par le patient.

La conception particulière des accoudoirs garantit une stabilité maximale même pendant l'entrée et la sortie par l'avant du fauteuil. L'accoudoir peut être abaissé rapidement en appuyant sur un bouton, et donc s'adapter à la morphologie du patient.

Un confort particulier est apporté au patient par l'intermédiaire d'une sellerie monobloc facile à nettoyer. La forme ergonomique du relève-buste associé à une sellerie confortable monobloc assure une position confortable aux patients compatibles avec les traitements longs. Le coussin de repose-tête réglable en hauteur par un contrepoind peut être ajusté à la position voulu.

Différents accessoires supplémentaires tels qu'une tige à sérum, un support porte rouleau drap d'examen ou une table peuvent être montés directement sur le SlimLine dans un encombrement réduit. Si votre patient souhaite lire ou travailler pendant son traitement, une lampe est adaptable en option. Si votre utilisation nécessite une liaison équipotentielle, cette dernière peut être commandée facilement.

Pour s'adapter à votre environnement la couleur de la sellerie du SlimLine peut être choisie parmi plus de 30 couleurs différentes. Le châssis bas, les accoudoirs et le coussin repose-tête en option sont toujours proposés en Anthracite.

um de confort et de flexibilité pour vos patients



lement développé pour les traitements
permettent un ajustement simple et rapi-
rt.



En cas d'urgence, en appuyant sur un bouton le SlimLine peut être mis en position de déclive pour une réanimation cardio pulmonaire. Bien que le châssis bas soit d'un faible encombrement, il offre une parfaite stabilité.



Le coussin de repose-tête offre un confort supplémentaire et peut être ajusté grâce à un contrepoids.




Pour plus de flexibilité, le SlimLine est équipé de roues (ø 7,5 cm) à freinage indépendant.



La télécommande illustrée propose deux positions, confort et urgence, pré-programmées. Chaque accoudoir est équipé en standard d'un support de télécommande facile d'accès.



Les accoudoirs stables sont réglables par un bouton afin de s'adapter aux besoins de vos patients.

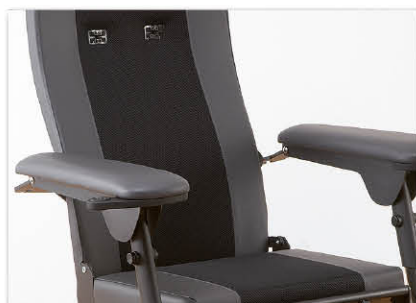

Le plan de couchage est composé d'un dossier ergonomique et d'une assise associés à une sellerie monobloc.



La sellerie amovible est facile à nettoyer et offre avec le plan de couchage un confort de longue durée.