

ML1450

Lit à hauteur fixe



Fauteuil Kosi

Chaise N250


Dosseret MMD1446

Table à manger au lit
plateau bois

Chevet Active Summum

5 modèles de sommier au choix:

- Lit ML1450 sans relève-buste ni relève-pieds
- Lit ML1451 avec relève-buste
- Lit ML1452 avec relève-buste et relève-pieds
- Lit ML1453 avec RB à translation et relève-pieds
- Lit ML1454 avec RB à translation, plicature genoux et RP

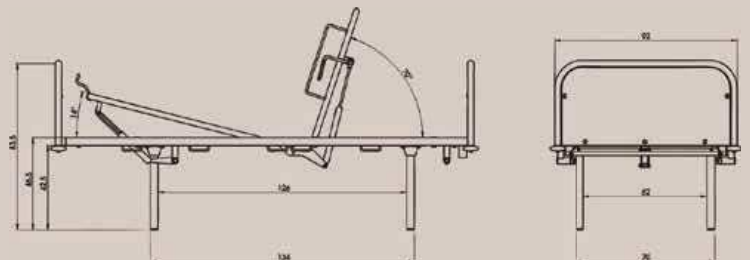

Hauteur fixe: 46,5 cm

Angle relève-buste: 0 à 70°

Angle relève-jambes: 0 à 14°


Plan de couchage: 200X90 cm

Dimension hors tout: 216X102 cm

Poids du lit: 65 kg

Charge de fonctionnement en sécurité (CFS): 250 kg

Poids patient Maxi: 185 kg

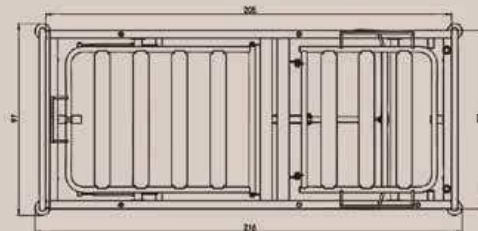

Piètement métal simple avec patins
ou avec platines de fixation au sol



Piètement métal avec roulettes, freinage par
barres de blocage ou pédales bilatérales



Piètement bois massif

" Grâce à sa structure renforcée, aux passages de sangles de contention et aux platines de fixation au sol, ce lit permet une **mise en sécurité totale des patients pour dispenser les soins nécessaires**, quelles que soient les conditions d'utilisation "



Dosserets tête et pied en finition bois ou PVC

1

4 butoirs de protection annulaires d'angle

2

Plusieurs types de piétement disponibles (métal simple, avec platines ou roulettes, bois)

3

Relève-jambes assisté par crémaillères

4

Remise à plat d'urgence par débrayage bilatéral du relève-buste

5

Relève-buste hydraulique assisté par vérin à gaz

6

Sommier en lattes époxy soudées

7

Emplacements pour 6 tiges porte-sérum et accessoires intégrés au cadre du lit

8

Emplacements pour 2 potences et accessoires situés en tête et pieds de lit

9

Les dosserets sont amovibles avec outil (verrouillage par écrou)

10

Barrières escamotables (conçuent selon la norme NF EN 60601-2-52) (verrouillage par écrou)

11

5 passages pour sangle de sécurité par côté

12