

# ML1460

Lit à hauteur variable hydraulique par croisillons



Fauteuil Kosi

Chaise N250

Dossieret MMD1446

Table à manger au lit  
plateau PVC érable

Chevet Active Summum

5 modèles de sommier au choix:

- Lit ML1460 sans relève-buste ni relève-pieds
- Lit ML1461 avec relève-buste
- Lit ML1462 avec relève-buste et relève-pieds
- Lit ML1463 avec RB à translation et relève-pieds
- Lit ML1464 avec RB à translation, plicature genoux et RP

Hauteur variable: 35 à 80,5 cm

Angle relève-buste: 0 à 70°

Angle plicature genoux: 0 à 14°

Plan de couchage: 200X90 cm


Dimension hors tout: 216X102 cm

Poids du lit: 113 kg

Charge de fonctionnement

en sécurité (CFS): 250 kg

Poids patient Maxi: 185 kg

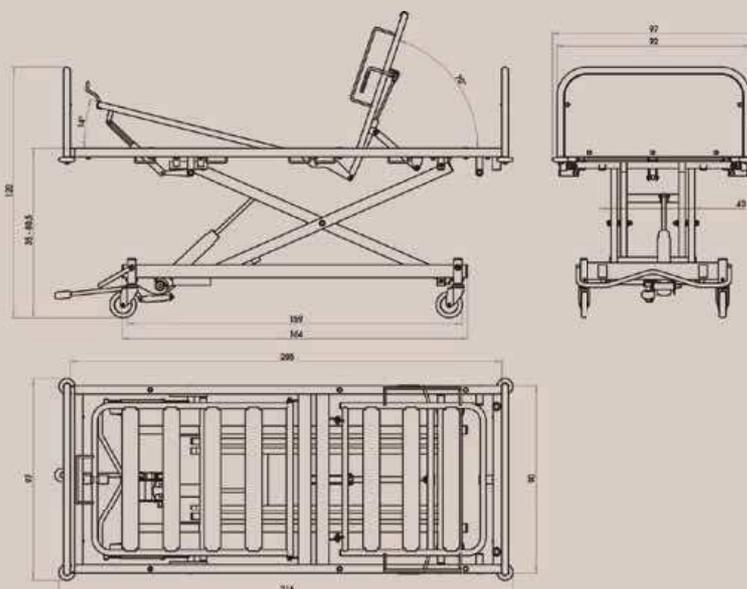

Position haute adaptée aux soins  
du patient par le personnel soignant




Position basse adaptée  
à la sortie du patient



Position Fowler avec relève-buste  
à translation afin de limiter les compressions  
abdominales et améliorer le confort du patient

" Un lit médicalisé adaptés aux établissements psychiatriques et **entièrement personnalisable grâce à des accessoires amovibles** (barrières, paire de dossierets, potence) "

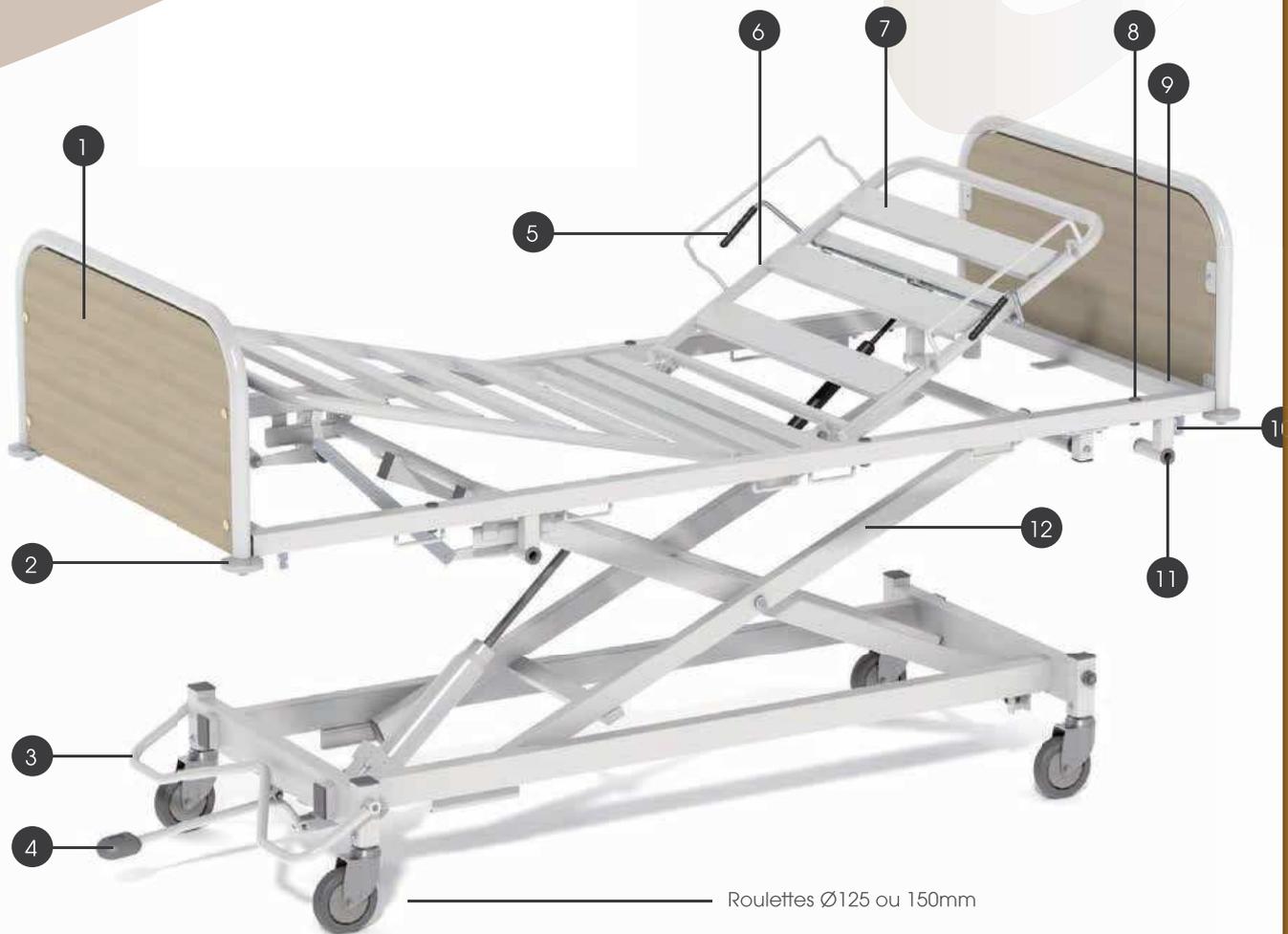

Dossierets tête et pied en finition bois ou PVC

1

4 butoirs de protection annulaires d'angle

2

Freinage centralisé par palette, accessible quelque soit la position

3

Pédale de hauteur variable

4

Remise à plat d'urgence par débrayage bilatéral du relève-buste

5

Relève-buste hydraulique assisté par vérin à gaz (translation en option)

6

Sommier en lattes époxy soudées

7

Emplacements pour 6 tiges porte-sérum et accessoires intégrés au cadre du lit

8

Emplacements pour 2 potences et accessoires situés en tête et pieds de lit

9

Les dossierets sont amovibles avec outil (verrouillage par écrou)

10

Barrières escamotables (conçuent selon la norme NF EN 60601-2-52) (verrouillage par écrou)

11

Hauteur variable: 35 à 80,5 cm

12