



SOCOMMED



Équipements Hospitaliers, Matériel Médical

Fauteuil de repos pliant



SAMREPOSE

- Personnel de nuit
- Pédiatrie
- Néonatalogie
- Maternité
- Hospitalisation
- Urgences
- Soins de suite
- EHPAD

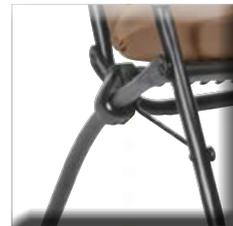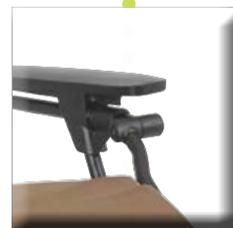




Fauteuil de repos pliant

POINTS FORTS

Conversion rapide

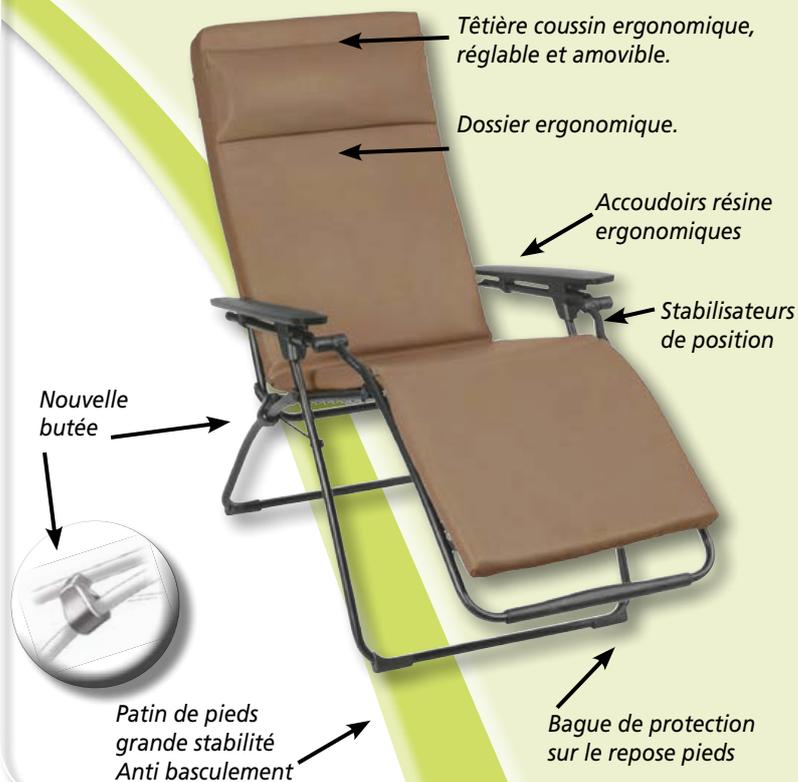

Voici le secret de son succès : le SAMREPOSE a été pensé pour offrir LA position idéale de relaxation. Sa conception a été accompagnée par le corps médical, qui a préconisé, comme principe essentiel, une position du corps telle que les jambes soient légèrement au-dessus du niveau du cœur. Cette position est appelée ZÉRO GRAVITÉ, car elle correspond à celle que prend naturellement le corps humain en apesanteur, les jambes et le buste formant un angle de 127°.

Facile à utiliser :

- Entrée et sortie du fauteuil facile grâce aux accoudoirs fixes
- Réglage de la position avec stabilisateurs.

Suspension par clips en élastomère injecté :


- Excellente ergonomie grâce à une meilleure répartition du poids du corps. Meilleur maintien du dos.
- Confort amélioré et plus ferme.
- Grande facilité d'entretien avec montage/démontage du matelas simple et rapide.
- Durée de vie exceptionnelle.

Résistance :

- Tube acier laqué H.L.E. (Haute Limite Elastique) de 20 mm de diamètre
- Excellentes propriétés fonctionnelles assurant une haute résistance au produit.
- Un niveau de robustesse très élevé tout en restant relativement léger.
- Finition laque cuite au four avec excellente tenue aux U.V.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

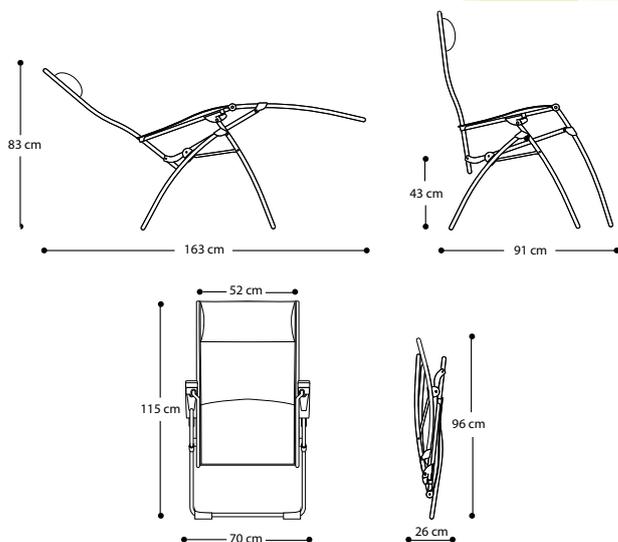

Descriptif produit :

Fauteuil de relaxation	Multipositions pliable, matelas amovible
Accoudoirs	Ergonomiques
Tête	Coussin rembourré, réglable et amovible

Descriptif matière :

Matelas amovible clippé	Garni mousse haute densité, épaisseur 4 cm
Revêtement matelas	Vinyl non feu M1 sans phtalates, nettoyable, 2 coloris disponibles
Tube Piétement	Acier laqué HLE (haute limite élastique) Ø 25 mm
Tube assise et dossier	Acier laqué diamètre Ø 20 mm
Peinture	100% polyester (haute résistance, anti-corrosion)
Poids du fauteuil avec matelas	9,7 kg
Poids maxi utilisateur	140 kg
Longueur totale en position repos : 163 cm	