




LED Bellon & LED Bella lumax

Retrouvez tout le savoir faire LID dans ces deux lampes de soin et d'intervention.

Elles offrent une puissance lumineuse exceptionnelle (LED Haute Performance) dans un format très compact et mobile. Pour les spécialistes les plus exigeants qui souhaitent un éclairage optimal du site opératoire et une reproduction fidèle des différentes nuances de couleur des tissus.

Idéales pour les services d'urgence, de traumatologie, les soins intensifs ou les unités de réanimation.

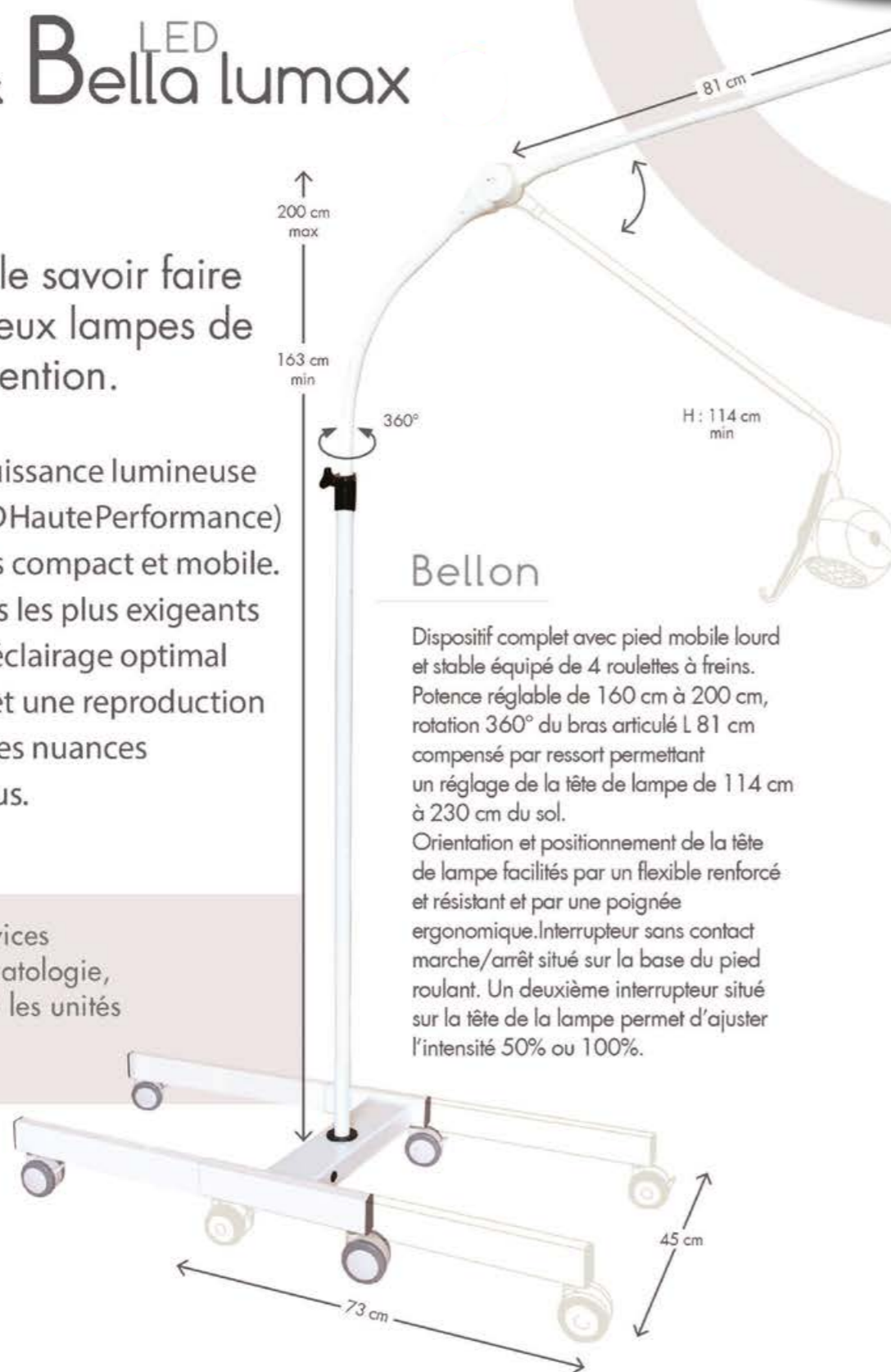

Bellon

Dispositif complet avec pied mobile lourd et stable équipé de 4 roulettes à freins. Potence réglable de 160 cm à 200 cm, rotation 360° du bras articulé L 81 cm compensé par ressort permettant un réglage de la tête de lampe de 114 cm à 230 cm du sol. Orientation et positionnement de la tête de lampe facilités par un flexible renforcé et résistant et par une poignée ergonomique. Interrupteur sans contact marche/arrêt situé sur la base du pied roulant. Un deuxième interrupteur situé sur la tête de la lampe permet d'ajuster l'intensité 50% ou 100%.



Bella Lumax

Un maximum de puissance dans un format lampe d'examen. Elle permet d'avoir tous les atouts d'une grande lampe d'intervention avec un minimum d'encombrement. L'option d'intensité 50/100% permet de passer d'un éclairage d'examen à un éclairage d'intervention

- Longévité des LED : 50 000 h minimum
- Protection électrique : isolation classe I (Bellon) - isolation classe II (Bella Lumax)
- Normes : EN 60 601 -1/ -2-41
- Longueur de câble d'alimentation : 3 mètres / 4 mètres
- Couleurs proposées : Blanc
- Dimensions de la tête : 16 x 13 cm
- Fixations possibles pour Bella Lumax: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13.

Dispositif Medical Classe 1

- Intensité Lumineuse **2300 Lumens***
- Température de couleur **4500°K* (blanc neutre)**
- Indice de rendu des couleurs **IRC 95/100**
- Consommation électrique **22 Watts**

Lux*	Faisceau 10°	Distance	Diamètre éclairé
240 000		30 cm	10 cm
160 000		50 cm	13 cm
44 000		100 cm	20 cm

* Tolérance des données +/- 10%

RÉFÉRENCES		
BELLON	LED17900DI-ISC	
	Interrupteur classique	Interrupteur sans contact
BELLA LUMAX Flexible 70 cm	LED22650	LED22650-ISC
+ Option double intensité	LED22650DI	LED22650DI-ISC

