

# Gamme chariot **SocoCLASSIC**

9 glissières / 12 glissières

FABRIQUÉ EN FRANCE

## Chariot modulable

Il se compose d'un plateau moulé avec poignée INTEGREE, deux rails porte-accessoires avec BUTEES ANTI-CHUTE, un bâti ALUMINIUM, un socle pare-chocs PLEIN ET RESISTANT, 4 roues pivotantes de diamètre 12,5 cm dont 2 à frein multidirectionnel.

Accès intérieur complet pour le nettoyage, avec démontage des parois sans outil.

Poignées moulées au plateau

Tous types  
de chariots  
selon  
la configuration



**SocoCLASSIC 9**

Capacité de stockage : 9 glissières  
Réf : 201010

OPTION :  
Fermeture  
centralisée



**SocoCLASSIC 12**

Capacité de stockage : 12 glissières  
Réf : 201025

## Liste des composants et des accessoires SocoClassic

D'autres références sont disponibles sur notre additif sur simple demande




Porte-ordinateur  
Réf : 204046



Rail porte-accessoires  
Réf : 204071



Panier  
Réf : 204017

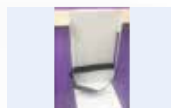

Porte-conteneur  
Réf : 204035



Porte-sacs  
Réf : 204020



Support sha  
Réf : 204024



Support boîte à gant  
Réf : 204023



Grand rangement  
Dim : 21 x 40 x 21 cm  
Réf : 204019



Poignée de poussée  
Réf : 204090



Tablette rabattable  
Réf : 204050



Portique boîtes  
basculantes  
Réf : 204005



Rangement dossiers  
Réf : 204040



# CARACTÉRISTIQUES DU CHARIOT *SocoClassic*

selon les tiroirs et accessoires choisis

## 3 OPTIONS DE FERMETURES CENTRALISÉES : clé / code électronique / scellé

Équipé de 2 rails porte-accessoires de série  
et possibilité de 4 rails si besoin

### Bâti en aluminium

- Très léger
- Pas de corrosion possible

### Revêtement époxy

- 150 couleurs au choix

### Socle pare-chocs

- Plein et résistant

Bloc panneau glissières intérieures  
démontables sans outils pour le nettoyage



Plateau avec poignées  
moulées

2 rails porte accessoires  
avec buté anti-chute

- Compatible avec tous les accessoires normalisés

Tiroirs jointifs en ABS extractible

- Protection de la lumière et de la poussière
- Robuste
- Capacité de stockage optimisée (pas de perte de place dû au rideau)
- Souplesse d'utilisation et d'organisation

4 roues pivotantes en polyamide

- dont 2 à frein
- Pas de corrosion
- Grande maniabilité

## Ergonomie :

Verrouillage centralisé des tiroirs, qui permet un accès direct aux tiroirs


Avec 2 tailles de chariots, il se décline en chariot de soins, chariot d'urgence, chariot d'anesthésie, chariot informatique et chariot escargot.

EN OPTION Verrouillage centralisé des tiroirs par :



Clé

Réf : 204075

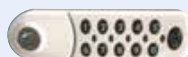

Code électronique

Réf : 204079



Scellé

Réf : 204076

## NUANCIER *SocoClassic*

Autres nuances disponibles  
sur simple demande



Ral 3018



Ral 4003



Ral 4004



Ral 4005



Ral 5012



Ral 6018



Ral 1028



Ral 5002

## Descriptif technique

### Encombrement :

Chariot 9 glissières : 96 X 70 X 50 cm  
Chariot 12 glissières : 108 X 70 X 50 cm

### Matériaux :

Aluminium, revêtement époxy, polypropylène

### Déplacement :

Poignée, et 4 roues avec bandage non tachant dont 2 à frein, diamètre 12,5 cm