

- Consultations
- Gynécologie
- Pôle Mère/enfant
- Cardiologie

FAUTEUIL DE PRELEVEMENT A HAUTEUR VARIABLE HYDRAULIQUE

51205T




CE



Caractéristiques :

- Fauteuil de prélèvement à hauteur variable hydraulique de 55 à 74 cm,
- Châssis composé d'une colonne télescopique
- Sellerie en forme confortable sur mousse épaisseur 8 cm, largeur 550, non feu classé M1, 10 coloris au choix gamme sellerie classique. Sellerie tendue sans coutures apparentes,
- Réglage du dossier et de la jambière en toutes positions par 2 vérins à gaz,
- Equipé d'une paire de gouttière prise de sang réglables en toutes positions par systèmes mécaniques sécurisés et indexables,
- Fauteuil pivotant avec possibilité de bloquer la rotation,
- Montée du fauteuil : Actionner la pédale de commande de la colonne à mi-course,
- Descente du fauteuil : Actionner la pédale de commande de la colonne au maximum de sa course et maintenir,
- Rotation du fauteuil : Blocage de cette rotation en levant la pédale au maximum,
- Position de Trendelenburg,
- Capacité de charge : 130 Kg en dynamique.

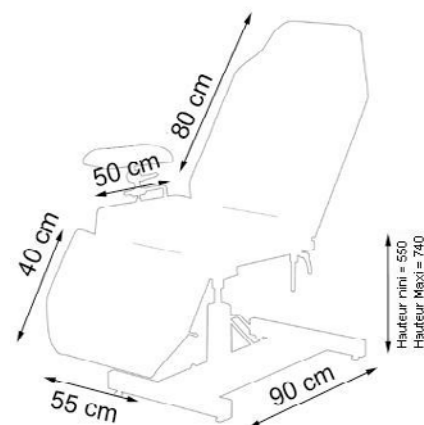

OPTIONS

- ACC125 : Porte rouleau



- ACC535 : Jeu d'étaux double pour fixation à la fois gouttière et tige porte sérum



- ACC32012 :


Tige porte sérum 2 crochets



- ACC537 : Paire d'étaux équipée de 2 molettes de serrage



- ACC105 : Paire d'étriers

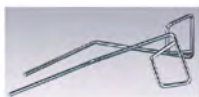

- ACC964 : Paire de repose-jambes



- SLFEMIREPOSE : Housse de protection repose-jambe, l'unité



- ACC110 : Gouttière prise de sang avec ferrure, mais sans l'étau, l'unité



- ACC110POLY : Gouttière polyuréthane noire complète sans étau



- ACCTETERGO : Tête ergonomique réglable



- ACC54005 : Tête 1/2 lune largeur 550 mm

- ACC9505 : 4 roulettes double galets avec freins

- ACC910-PLAT02 : Support + plateau inox 340x340 mm pour fauteuil de prélèvement

