

### COMFORT-3 FLEX

- Le fauteuil de soins Comfort-3 Flex est conçu pour faciliter le travail des médecins et du personnel médical.
- Un soin particulier est porté pour le confort du patient afin de le soulager de ses tensions pendant son hospitalisation.
- De nombreuses options sont disponibles pour répondre aux différentes utilisations.
- Son design épuré lui permet de s'intégrer dans des espaces restreints.



## POINTS FORTS

### Ajustements des principaux mouvements par vérins électroniques

De multiples possibilités de réglages indépendants par moteurs (3+1) assurent un confort au patient, et soulagent le travail du personnel soignant.

- Dossier
- Inclinaison de l'assise
- Repose-jambes
- Repose-pieds (optionnel)

### Accoudoirs inclinables

Les accoudoirs rembourrés réglables en hauteur et en rotation, permettent d'obtenir une position confortable du bras et la plus appropriée à tous les types de morphologie.

La sellerie d'accoudoirs souple multicouche permet une entière étanchéité aux liquides et assure un confort accru au patient. La distance entre les accoudoirs peut être ajustée de 48 à 58 cm.

### La garniture interchangeable

Elle peut être retirée facilement en quelques gestes pour le nettoyage ou la maintenance.

Grâce à cette fonctionnalité, la remise à niveau d'anciens fauteuils peut être réalisée facilement. Le fauteuil a été conçu selon les derniers développements en orthopédie et en ergonomie. La sellerie résiste aux désinfectants hospitaliers, au sang et à l'urine.

### Repose-pieds électrique (optionnel)

Le patient ou personnel soignant peuvent ajuster à tout moment la position du repose-pieds par l'intermédiaire de la télécommande. En version standard, le réglage s'effectuant manuellement.

### La position d'entrée

Les accoudoirs relevables permettent au patient d'entrer et sortir facilement de part et d'autre du fauteuil.



### Position de Trendelenburg

La position de déclive d'urgence actionnée par télécommande (commande aux pieds optionnelle), permet de positionner la tête du patient plus basse que son cœur, conformément au Standard Medical EN 60601.




\* Les fauteuils sur la photo comportent des éléments optionnels

### Télécommande simple à utiliser

Fonctions préprogrammées

- Opération à un bouton pour « Accueil assis », « Accueil lit » et « Trendelenburg » (Déclive).
- La position déclive peut être facilement activée en utilisant le bouton rouge.
- La télécommande a été spécialement conçue pour les applications médicales.

- Les Micro-interrupteurs à durée de vie augmentée sont situés sous un folio échangeable.
- L'utilisation du fauteuil peut être assurée en option par une batterie de secours rechargeable
- Boîtier étanche IP67.

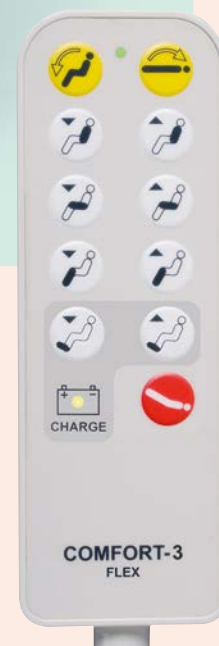

Sellerie standard  
couleur :  
• Chrom 1205 /  
Perle 1288

Multiples combinaisons  
de couleurs au choix



- 1 Sellerie interchangeable, plusieurs combinaisons simples ou bicolores
- 2 Table à manger Comfort-T2 réglable, fixée au fauteuil
- 3 Coussin repose-tête moelleux forme carrée
- 4 Repose-pieds électrique
- 5 Support rouleau drap d'examen (Papier largeur : 50 cm)
- 6 Tige à sérum télescopique, avec son support
- 7 Lampe de lecture LED sur bras flexible
- 8 Barre de poussée
- 9 Table à manger mobile Comfort-T1 avec boîte de rangement plastique
- 10 Position décline par pédales bilatérales sur châssis bas
- 11 Freinage centralisé
- 12 Accoudoirs barrières escamotables
- 13 Barre de poussée universelle
- 14 Support tige à sérum supplémentaire

### La table à manger multifonction Comfort-T1

Solidaire du fauteuil, elle offre une solution pour un gain de place. Elle peut être

positionnée des deux côtés du fauteuil.

Les plateaux peuvent être facilement nettoyés et enlevés.

### Table à manger Comfort-T2

Sur châssis mobile, elle s'intègre sur tout type de Fauteuils de soins.

La hauteur de la table peut

être ajustée au besoin (de 75 à 98 cm).

Dimensions des plateaux : 40 x 56 cm et 40 x 17 cm.

### Echantillons de couleurs

|                 |                 |                  |              |                 |                 |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| perle<br>1288   | sand<br>1230    | chrom<br>1205    | mint<br>1495 | aqua<br>1456    | türkis<br>1338  |
| agave<br>1273   | limone<br>1543  | limonade<br>1343 | mais<br>1457 | apricot<br>1458 | karneol<br>1557 |
| kirsche<br>1199 | dolphin<br>1609 | bleu<br>1496     | sky<br>1581  | atoll<br>1453   | royal<br>1196   |

\* Plus de 50 couleurs disponibles sur demande

### Plusieurs combinaisons de couleurs



| Accessoires Optionnels                                                                                         | Art.-Nr.   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Plateau lecture/repas, inclinable Comfort-T1, mobile                                                           | 6200501    |
| Kit de connectivité EPN incluant broche multi contact (fortement recommandé pour la dialyse)                   | 713E004    |
| Mise en déclive d'urgence électrique par 2 pédales bilatérales                                                 | 713E005    |
| Batterie de secours rechargeable en cas de panne de courant (24 VCC)                                           | 713E006    |
| Bouton d'arrêt d'urgence                                                                                       | 713E007    |
| Lampe de lecture à LEDS                                                                                        | 713E008    |
| Prise USB de chargement (5V, 1A)                                                                               | 713E009    |
| Prédisposition pour réception tige à sérum                                                                     | 7130831    |
| Repose-pieds électrique, réglable par la télécommande                                                          | 713M006    |
| Tige à sérum télescopique avec support                                                                         | 713M007    |
| Porte rouleau drap d'examen (largeur 500 mm)                                                                   | 713M008    |
| Plateau lecture/repas inclinable avec support solidaire du fauteuil (non compatible avec l'option 713U021)     | 713M009    |
| Accoudoirs réglables en hauteur pour médecine (paire)                                                          | 713M010    |
| Amortisseur intégré au support de bras pour manipulation en douceur (paire)                                    | 713M011    |
| Barre de poussée fixée à l'arrière du dossier                                                                  | 713M012    |
| Support universel pour tablettes et smartphones                                                                | 713M013    |
| Poignées situées de part et d'autre du dossier du fauteuil                                                     | 713M014    |
| Tablette support agitateur, solidaire du fauteuil                                                              | 713M015    |
| Freinage centralisé par 4 roulettes doubles galets de Ø 100 mm                                                 | 713M016    |
| Hauteur du fauteuil variable par réglage motorisé                                                              | 713M017    |
| Freinage centralisé par 4 roues doubles galets de Ø 75 mm                                                      | 713M020    |
| 4 roulettes à frein, Ø 100 mm                                                                                  | 713M021    |
| Protection plastifiée pour repose-pieds                                                                        | 713U006    |
| Protection plastifiée pour relève jambes                                                                       | 713U007    |
| Sac en filet lavable pour rangement des affaires du patient                                                    | 713U008    |
| Supplément pour choix de couleur(mono ou bi-couleurs),parmi 40 coloris TUNDRA (hors standard Beige clair 1636) | 713U009    |
| Revêtement spécial type "cuir synthétique" ignifuge PALMA (M1)                                                 | 713U010    |
| Supplément pour inscription logo personnalisé                                                                  | 713U011    |
| Coussin de repose-tête carré                                                                                   | 713U012    |
| Épaisseur matelas de 110 mm (au lieu de 80 mm)                                                                 | 713U017    |
| Plateau lecture/repas inclinable avec support                                                                  | Comfort T1 |

## General technical data

|                               |                                   |                               |                                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Hauteur assise fixe           | 62 cm                             | Taille des roues              | 4 x Ø 7.5 cm roues jumelées avec blocage                          |
| Dossier ajustable             | 0..80° (-15° en position déclive) | Poids du fauteuil             | 60 kg                                                             |
| Angle de l'assise ajustable   | 15° Maximum                       | Poids maximum admissible      | 200 kg                                                            |
| Repose-jambes ajustable       | 0-30°                             | Alimentation standard         | 100-240 V AC, 50/60 Hz IPX6                                       |
| Réglage du repose-pieds       | 0 à 25 cm                         |                               |                                                                   |
| Dimensions en position assise | L 99 x Largeur 87 x H 139 cm      | Caractéristiques moteurs      | 24V DC, IPX6                                                      |
| Dimensions sellerie           | L 195 x Largeur 55 x Ep 8 cm      | Couleur châssis               | RAL 9001                                                          |
| Dimensions accoudoirs         | L 60 x Largeur 15 cm              | Directive appliquée et normes | 93/42 / CEE et normes harmonisées (EN60601-1; EN60601-2-52; etc.) |

Approved by TÜV Product Safety

